


## TI500 Globe-Trotter® Транспортировка новорожденных

Транспортная система для новорожденных Dräger TI500 Globe-Trotter® сочетает технологию Dräger TI500 с дополнительными функциями для улучшения ухода при транспортировке.

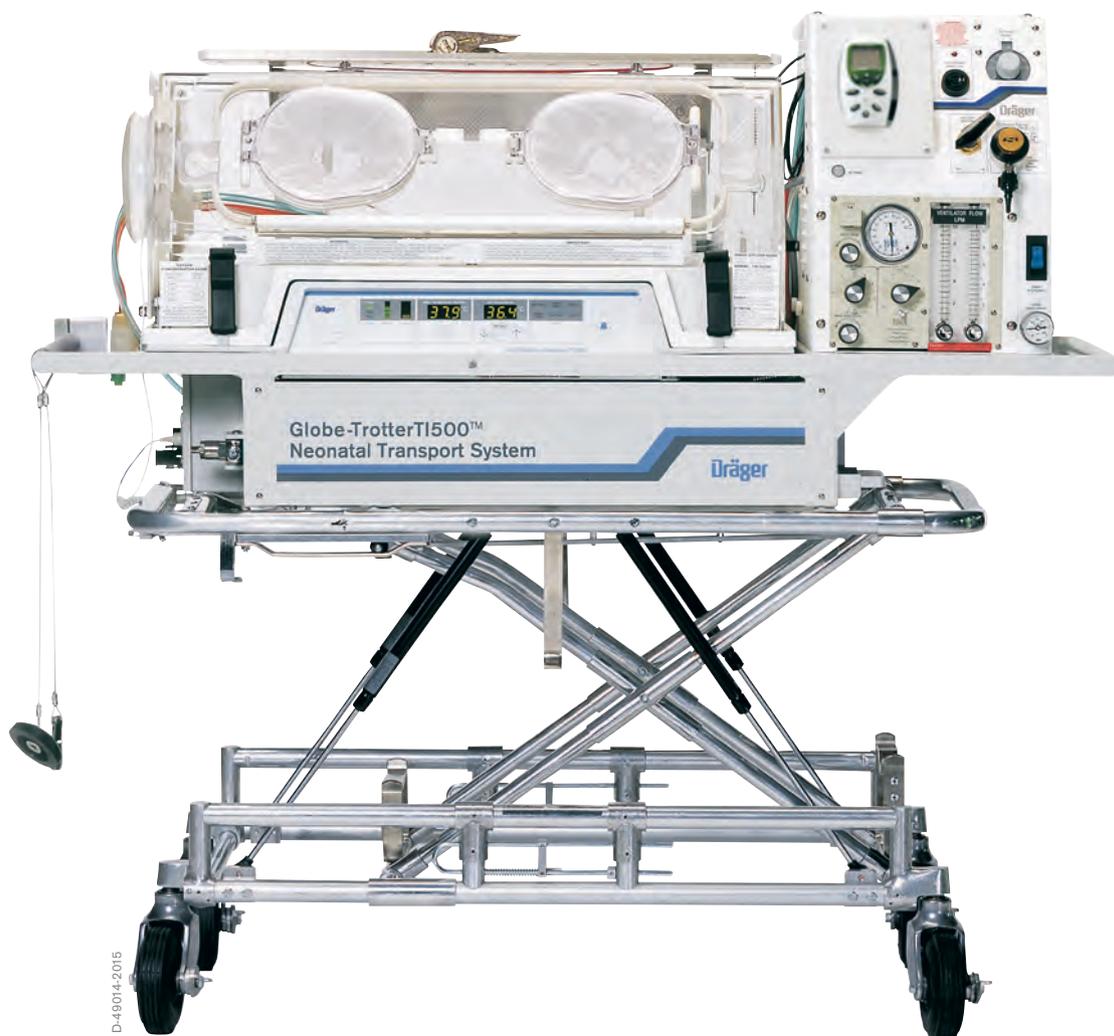

## Преимущества

---

### Интегрированная система искусственной вентиляции лёгких

Транспортная система для новорожденных Dräger TI500 Globe-Trotter предназначена для перевозки младенцев в термо-нейтральной среде, при этом она обеспечивает комплексную вентиляционную поддержку. Система конфигурируется таким образом, чтобы искусственная вентиляция и анализаторы кислорода могли обеспечить потребности каждого пациента.

---

### Все элементы управления на передней панели

Все системы управления инкубатором, вентилятором, газораспределением и манометры установлены спереди для быстрого доступа и улучшения видимости.

---

### Внутреннее размещение газовых баллонов

Газовые баллоны находятся под инкубатором, в рамном отсеке системы, поэтому они всегда перемещаются вместе с инкубатором. Встроенные флоуметры, хомутовые соединения и расходомеры исключают необходимость во внешних газопроводах.

---

### Вспомогательный расходомер

Вспомогательный расходомер входит в стандартную комплектацию системы, а дополнительный ручной контур позволяет при необходимости выполнять реанимацию вручную. Такая компоновка позволяет вентилировать близнецов в одном инкубаторе.

---

### Опционный воздушный компрессор

TI500 Globe-Trotter является единственной из всех ведущих транспортных систем для новорожденных, которая имеет опцию встроенного воздушного компрессора. Это позволяет обеспечить подачу воздуха для решения клинических задач и исключить необходимость в использовании воздушных баллонов.

---

### Дополнительные преимущества:

- Средства для инфузионной терапии и мониторинга жизненно важных показателей
- Ремни для предотвращения случайной экстабуции
- Возможность подзарядки аккумуляторов от дополнительного источника питания
- Выбор тележек
- Дополнительный второй аккумулятор

## Принадлежности



D-7384-2009

### Принадлежности для неонатальной терапии

Высококачественные принадлежности Dräger для неонатальной вентиляции и термотерапии содействуют развитию новорожденных, снижают стресс, облегчают работу персонала.

## Технические характеристики

Высота	58,4 см
Длина	129,5 см
Ширина	56,5 см
Вес без компрессора	71,6 кг <sup>1)</sup>
Вес с компрессором	83,9 кг
<b>Электрические характеристики</b>	
Требования к питанию перем. тока	110/120 В, 50/60/400 Гц 220/240 В, 50/60/400 Гц
Пост. ток (только инкубатор)	12 или 28 В
Ток утечки системного блока	120 В < 300 мкА + 10% 220 В < 500 мкА + 10%
Розетки перем. тока – 6 шт.	
Кабель перем. тока и пост. тока инкубатора в комплекте	
<b>Характеристики батареи компрессора</b>	
Тип	Герметичный гелевый перезаряжаемый аккумулятор, 12 В пост. тока, 20 А/ч.
Время работы от аккумулятора	Минимум 3 часа при установке смесителя на 21% кислорода
Ожидаемый срок службы	минимум 200 полных циклов зарядки/разрядки
Время зарядки	20 часов от состояния полной разрядки
Тревожный сигнал низкого заряда батареи	Когда остается 30 минут работы воздушного компрессора
Примечания: 1) Вес с одной батареей GlobeTrotter является торговой маркой компании Dräger.	

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.

Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**Штаб-квартира**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Германия  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Производитель:**  
Dräger Medical Systems, Inc.  
3135 Quarry Road  
Telford, PA 18969, USA

**РОССИЯ**  
ООО «Дрегер»  
Преображенская площадь, д.8.  
Бизнес Центр ПРЕО8,  
блок «Б», 12 этаж  
Москва, Россия, 107061  
Тел +7 495 775 15-20  
Факс +7 495 775 15-21  
[info.russia@draeger.com](mailto:info.russia@draeger.com)

**Сервисный центр**  
Электрозаводская ул., д.33,  
стр.4  
Москва Россия 107076  
Тел. +7 495 775 15-20  
Факс +7 495 662-72-23  
[info.russia@draeger.com](mailto:info.russia@draeger.com)

Найдите вашего  
регионального торгового  
представителя на:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

